

Descascaradora de Arroz Portátil

Modelo TR130

Kett

SCIENCE OF SENSING



Kett

Las Mediciones del mañana, Hoy!
1-714-974-8837

Descascaradora de Arroz Portátil

Descascara fácilmente Pequeñas muestras de Arroz

Este instrumento de fácil uso descascara pequeñas muestras de arroz para proporcionar arroz cargo. Este proceso es utilizado para generar mediciones adecuadas de humedad así como únicas aplicaciones R&D.


Fácil Operación – Resultados de Nivel Mundial

Para descascarar una muestra, simplemente vierta el arroz paddy en el TR130. Cierre la tapa y gire la manivela. Mientras se descascara el arroz, el arroz cargo es automáticamente movido a una caja separada donde puede ser retirado para medir la humedad. La cáscara puede ser fácilmente desechada.

La operación es muy limpia porque la prueba es completamente cerrada. Cada muestra es de 8g aproximadamente. Como la preparación manual de la muestra es eliminada, el uso del TR130 mejora la eficiencia de las mediciones de arroz de laboratorio o la elevación de granos así como facilita tomar una variedad de mediciones de humedad. Además, los resultados de las pruebas son más estables por el mejoramiento de la consistencia del arroz cargo.

Otros Medidores de Arroz e Instrumentos de Procesamiento Kett

El TR130 es el último diseño de Kett, considerado el líder mundial en mediciones de arroz de calidad. Fabricamos una amplia gama de instrumentos y tecnologías auxiliares. Algunos de nuestros más populares productos son mostrados a continuación.

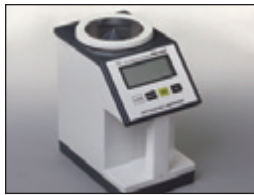

• Medidor de Humedad Portátil PM450



• Medidor de Humedad Avanzado PM650



• Medidor de Humedad Portátil Riceter



• Analizador Instantáneo de Composición de Arroz AN820



• Medidor de Blancura de Arroz C600

Hechos para Durar – Resultados de Laboratorio de Calidad Durabilidad de Producción en Línea

Kett se mantiene detrás de los sistemas TR130 con una **Garantía de fabricación de un Año completo en Cuidados de piezas**, mano de obra y cumplimiento de las especificaciones. La solvencia y confiabilidad Kett le permite enfocarse productivamente en el mejoramiento de la calidad de sus productos sin perder tiempo calibrando y verificando nuestras mediciones. Kett es reconocida a nivel mundial como el líder mundial en instrumentos de medición de granos. Con más de 65 años de diseños y fabricación de excelencia, el TR130, como todos los instrumentos Kett, es el estándar en el cual los otros son juzgados.



• Analizador de Arroz TX200



• Analizador de Calidad de Arroz RN300



• Clasificadora de Arroz Automatizado RN600



• Descascaradora Eléctrica de Arroz Avanzada TR250



• Pulidora de arroz Pearlest

La Medición del Mañana, Hoy!

Además de nuestro TR130 único, Kett fabrica cerca de 200 diferentes instrumentos. Disponible para portátiles de mano, escritorio de laboratorio o aplicaciones de procedimientos en línea, si usted precisa mediciones, le ofrecemos soluciones....Hoy! Si usted precisa medir componentes orgánicos - - de forma precisa, rápida y simple, desea hacer una orden o requiere de una guía adicional en la selección del modelo, por favor llame gratis a Kett!!

1-800-GET-KETT

Especificaciones

Modelo	TR130
Principio	Molienda, Descascarado
Volumen de Muestra	Aproximadamente 8g
Producto	Arroz Paddy (a Arroz Cargo)
Rango de Humedad	12-18%
Tiempo de Descascarado	Aproximadamente 20 segundos
Peso (kg) (Neto/Embarque)	0.2/1
Dimensiones (mm)	112(W)x79(H)x70(D)
Garantía	Un Año de Total Cuidado Acuerdos de Mantenimiento Disponibles



PMB 504, 17853 Santiago Boulevard,
Suite 107, Villa Park, CA 92861
714-974-8837 • 714-974-8877 (FAX)

1-800-438-5388

www.Kett.com

Sales, Support, Service

ISO 9001

